

# SALON LASER™

## SCANNING HAIR REMOVER

LAHC2

Aallonpituus  
808 nm

Lasersuojalasien käyttö ei ole tarpeen, koska tuotteeseen on lisätty turvaominaisuuksia valmistusvaiheessa.

LASER SAFE™  
TECHNOLOGY

PATENTTEJA  
VIREILLÄ



LUOKAN 1 TUOTE,  
JOSSA ON  
LUOKAN 3B LASER

1-IN-LAHC2-FIDA/1.0





## käyttöohjeet

### VAROITUKSIA

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Ei sovi afrokaribialaiselle eikä mustalle iholle tai harmaille karvoille. Katso käsikirjan kohtaa "Sopivat ihotyypit".
- Karvojen poisto laserilla ei yleensä aiheuta epämukavuutta; saatat tuntea, kun yksittäisiä karvoja käsitellään, mikä tuntuu lähinnä lievältä neulanpistoilta, sekä käsiteltävän alueen lievää lämpenemistä. Jos tunnet epämukavuutta tai arkuutta, asetus saattaa olla liian korkea.
- Sisäiset turvaominaisuudet suojaavat silmiä lasersäteeltä, mutta älä suuntaa puikkoa silmiisi tai niiden lähelle.
- ÄLÄ käytä syttyvien aineiden lähellä.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Heijastumisvaara: poista kaikki käsiteltävän alueen lähellä olevat korut ennen laitteen käyttöä.
- Kun laite ei ole käytössä, säilytä avainta turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.
- Älä käsittele samaa karvaa useaan kertaan samalla käsittelykerralla.
- Älä käytä juotuasi alkoholia tai jos tunnet olosi huonoksi tai väsyneeksi.
- Älä käsittele seuraavia alueita: tatuoinnit, kestoneikki, finnit, syylät, mustapäässä tai luomissa olevat karvat, tummat pisamat, ihotauti, syntymämerkit, palovammat, huulet, nännit, sukuelin- ja peräaukon alueet, rohtumat, silmäripset, kulmakarvat, silmien ympärys, nenässä tai korvissa olevat karvat.
- Tämä on herkkä lasertuote. Puikon mekanismi on varottava vaurioittamasta.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu kenenkään sellaisen käyttöön, jolla on fyysinen, aistellin liittyvä tai henkinen vamma, tai kokemuksen tai tiedon puute, ellei heitä valvo tai ohjaa laitteen käytössä heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.

### VAROTOIMENPITEET

- ÄLÄ pura tai korjaa laitetta. Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Laitteen väärinkäyttö voi olla vaarallista.
- ÄLÄ ohita turvaominaisuuksia äläkä avaa laitetta tai puikkoa.
- Käytä tuotetta vain pakkauksessa olevalla verkkolaiteella.
- Pidä puikko loitolla voimakkaista sähkömagneettisista kentistä ja magneeteista käytön aikana.

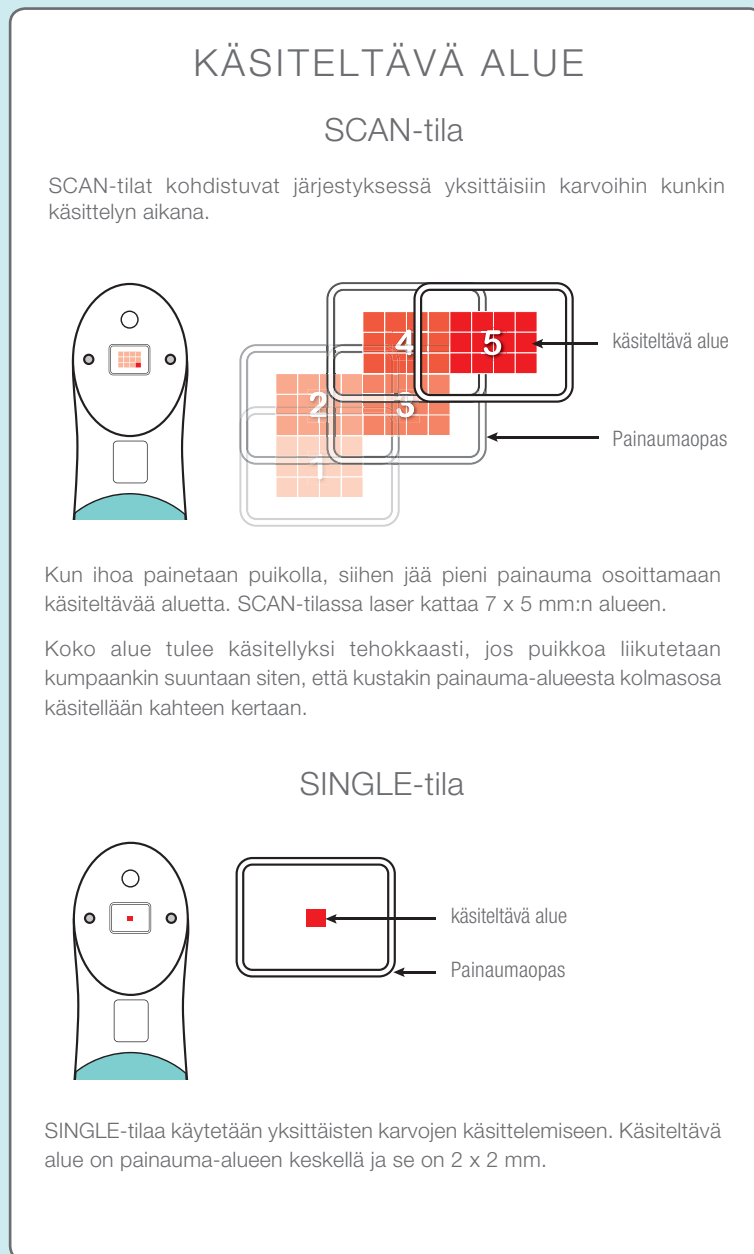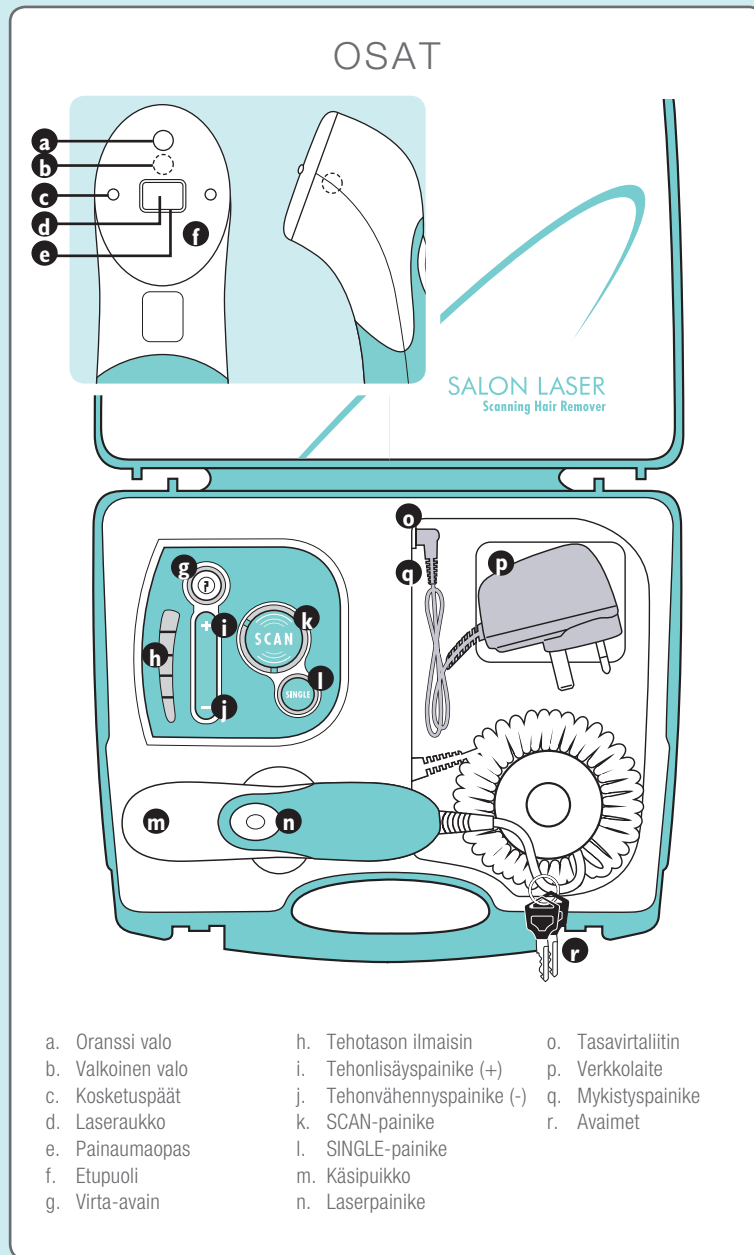

### PAIKKAKOE

**TÄRKEÄÄ:** On erittäin tärkeää tehdä paikkakoe 24 tuntia ennen käsittelyä aloittamista.

Paikkakokeella varmistetaan ihotyypillesi sopiva enimmäisteho. Jokainen käsiteltävä alue on tarkistettava, koska ihon väri voi vaihdella. Katso ohjeet käsikirjan ja DVD:n kohdasta "PAIKKAKOE".


Käsittelyn jälkeen voi ilmetä lievää punoitusta. Paikallinen punoitus käsittelyn jälkeen johtuu juurituppien tuhoutumisesta ja on aivan normaalia. Jos punoitus ei kuitenkaan häviä 24 tunnissa, valittu tehotaso on liian korkea ihotyypillesi.

### NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Muista lukea käsikirja ja varmistaa, että ymmärrät varoitukset ja tuoteturvallisuuteen liittyvät seikat ennen laitteen käyttöä.

Saat parhaat tulokset käyttämällä SCAN-tilaa. Siinä käsitellään kokonaista aluetta, ei yksittäisiä karvoja.


- Aja karvat käsiteltävältä alueelta. Tämä varmistaa sen, että laser ohjautuu suoraan karvan juureen eikä polta sitä ihon pinnalla.
- Poista kaikki käsiteltävän alueen lähellä olevat korut.
- Varmista, että olet tehnyt paikkakokeen käsiteltävällä alueella 24 tuntia ennen käsittelyä aloittamista.

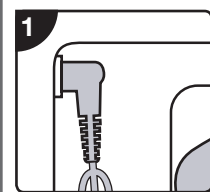

#### VAIHE 1

Liitä verkkolaite laitteen takapuolella olevaan tasavirtaliittimeen ja kytke johto pistorasiaan.

Virta-avaimen valo palaa oranssina.

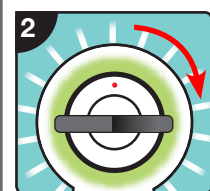

#### VAIHE 2

Kytke laitteeseen virta avaimella. Virta-avainta ympäröivä valo vilkkuu vihreänä.




#### VAIHE 3

Syötä "TURVAKOODI" 60 sekunnin kuluessa virta-avaimen kääntämisestä päälle.

**Turvakoodi on annettu käsikirjassa.**

Virta-avainta ympäröivä vihreä valo syttyy palamaan. SCAN- ja SINGLE-painikkeita ympäröivät valot vilkkuvat sinisinä, jolloin painikkeet ovat valmiina valittaviksi. Alhaalla oleva tehotasovalo syttyy palamaan.

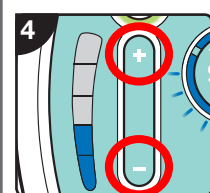

#### VAIHE 4


Valitse ihotyypillesi sopiva tehotaso plus- ja miinuspainikkeilla (+/-). Katso ihotyypit käsikirjan osasta "Paikkakoe".

Joka kerta, kun tehotasoa muutetaan, on valittava SCAN- tai SINGLE-tila ennen jatkamista.

**Huomaa:** Jos yhtään painiketta ei paineta 20 minuutin kuluessa, laite siirtyy virransäätötilaan. Oranssi valo vilkkuu ja tehotaso 1 jää päälle. Aloita uudelleen kääntämällä avain päältä pois ja takaisin päälle ja aloita vaiheesta 3.

### KARVOJEN KÄSITTELY LASERILLA


### KARVOJEN KÄSITTELY SCAN-TOIMINNOLLA

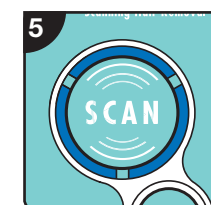

#### VAIHE 5

Paina SCAN-painiketta kerran. SCAN-painiketta ympäröivä sininen valo syttyy palamaan.

Puikon oranssi valo syttyy.

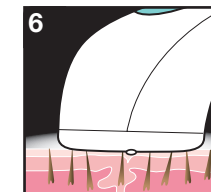


#### VAIHE 6

Aseta puikko iholle käsiteltävälle alueelle ja varmista, että kosketuspäät koskettavat ihoa.

**Katso kohtaa "käsiteltävä alue", SCAN-tila.**

Oranssi valo sammuu (OFF) ja valkoinen "valmis"-valo syttyy (ON).

SCAN-painiketta ympäröivät siniset valot syttyvät vuorotellen sen merkiksi, että käsittely voi alkaa.

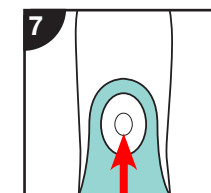

#### VAIHE 7

Paina puikon päällä olevaa laserpainiketta pitempään, kun haluat aloittaa käsittelyn.

Valkoinen valo vilkkuu päälle ja pois sen merkiksi, että laser käsittely on käynnissä, ja yksiköstä kuuluu toistuva merkkiääni (tämä voidaan mykistää). Laseria ei voi nähdä.

Kun laser käsittely lakkaa, oranssi valo syttyy jälleen. Voit nyt siirtyä käsittelemään seuraavan alueen karvoja.


Käsittelyn aikana voi tuntua "neulanpisto". Paikallinen punoitus käsittelyn jälkeen johtuu juurituppien tuhoutumisesta ja on aivan normaalia. Jos punoitus ei kuitenkaan häviä 24 tunnissa, valittu tehotaso on liian korkea ihotyypillesi. Katso käsikirjan kohtaa "Paikkakoe". Pitempään kestävä punoitus häviää myös.

Kun puikko siirretään seuraavalle karvojen käsittelyalueelle, kosketuspäät on poistettava iholta hetkeksi.

**Katso kohtaa "käsiteltävä alue", SCAN-tila.**

#### Tärkeitä huomautuksia - lue huolellisesti

- ÄLÄ poista puikkoa käsittelyn aikana. Puikko saattaa lämmentä käytön aikana. Tämä on aivan normaalia.
- SCAN-tilassa laser toimii 10 sekuntia alimmalla tehotasolla ja enintään 50 sekuntia ylimmällä tehotasolla. SINGLE-tilassa laser toimii 2 sekuntia alimmalla tehotasolla ja enintään 10 sekuntia ylimmällä tehotasolla.
- Jos kosketuspäiden ja ihon välinen kontakti katkeaa käsittelyn aikana, oranssi valo syttyy. Käsittely jatkuu, kun kontakti palautetaan.
- Joskus karvan käsittelyn aikana saattaa tuntua lievää palamisen hajua tai saatetaan nähdä hyvin pieni savujuova.
- Onnistuneesti käsitellyt karvat eivät aina putoa välittömästi, vaan ne irtoavat ajan mittaan niiden vapautuessa juuritupista; kevyt hieronta voi edistää tätä.

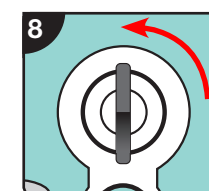


#### VAIHE 8

Lukitse laite kääntämällä virta-avainta vastapäivään. Pane avain turvalliseen paikkaan lasten ulottumattomiin. Virta-avaimen valo palaa oranssina, kunnes verkkolaite irrotetaan seinästä.

**Huomaa:** Jos tuote toimii odottamattomalla tavalla, se voi johtua ulkoisesta sähkömagneettisesta häiriöstä, esim. sähkömoottoreista/kaiuttimista. Poista kyseinen häiriö ja käynnistä laite uudelleen. Laser ei käynnisty koskaan vahingossa.

### KARVOJEN KÄSITTELY SINGLE-TOIMINNOLLA

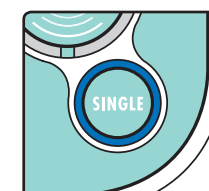


#### VAIHE 8

Yksittäisiä karvoja voidaan käsitellä SINGLE-tilassa.

Paina SINGLE-painiketta kerran. SINGLE-painikkeen valo palaa sinisenä.

Puikon oranssi valo syttyy.

**Noudata SCAN-käsittelyn menettelyä vaiheesta 6 lähtien, mutta paina tällä kertaa SINGLE-painiketta.**

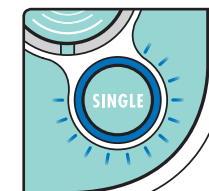

SINGLE-tilassa SINGLE-painiketta ympäröivä sininen valo vilkkuu.

SINGLE-tilassa käsittelyaika on 2–10 sekuntia riippuen valitusta tehotasosta.

**Katso kohtaa "tähtäys ja sijoitus", SINGLE-tila.**

### LISÄTIETOJA



Kytke merkkiäänät pois painamalla laitteen takapuolella olevaa MUTE-painiketta. Paina sitä uudelleen, kun haluat äänät taas kuuluviin.


**Huomaa:** Tämä ei kytke pois varoitussääniä.

### lukituksen jälkeinen nollaus



Jos laite joutuu "lukitustilaan", mikä näkyy siitä, että jokin sinisistä tehovaloista vilkkuu, nollaa se kytkemällä laitteen virta pois avaimella, odota 5 sekuntia ja kytke virta takaisin päälle.

### laseraukon puhdistus

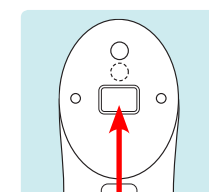

Tarkista säännöllisesti, näkykö laseraukossa nokijälkiä. Jäämien kertyminen heikentää laserin tehokkuutta. Jos havaitset jäämiä, kytke laitteen virta pois (OFF) ja irrota verkkolaite. Pyyhi laseraukko nukattomalla kankaalla tai pumpulipuikolla ja varmista, ettei siihen jää kuituja.