

KÄYTTÖOPAS

DermaSeta™



Huippujärjestelmä kehon hoitoon



VIANETSINTÄ

OIREET

• PERUSYKSIKKÖ

Varusteet eivät pyöri:

Karvanpoisto tuntuu vievän enemmän aikaa kuin ensin tai karvat eivät poistu lainkaan:

Varusteet irtoavat, kun virta kytketään virtakatkaisijasta:

Tehon havaitaan vähentyneen:

• DELUXE-YKSIKKÖ

Derma Seta ei käynnisty:

Akut eivät lataudu:

Kehdossa ei pala LED-merkkivalo.

MENETELMÄT

Varmista, että akut ovat laitteessa ja asetettu oikein päin.

Tunnustele tyynyn pintaa: jos se tuntuu pehmeältä, on aika vaihtaa tyyny. Noudata ohjeita tyynyn vaihdosta.

Varmista, että varuste on oikein asennettu. Asennettaessa tulisi kuulua pehmeä naksahdus, joka kertoo tyynyn olevan kiinni.

Ota huomioon, että **Derma Seta™**-laitteen paras teho voidaan varmistaa vain uusilla tai äskettäin ladatulla alkaliakuilla.

Jotta **Derma Seta™** käynnistyisi, akuissa täytyy olla riittävä lataus. Ennen ensimmäistä käyttöä lataa laitetta 4 tuntia.

Jotta akuista ei purkautuisi virta kokonaan, älä anna **Derma Seta™**-laitteen jäädä lataamattomaan tilaan pitkäksi ajaksi.

Varmista, että virtalähde on työnnetty kiinni verkkovirtapistorasiaan ja tasavirtajohto on liitetty Charging Cradle -latauskehtoon.

KIITOKSEMME

Koko Tvins-tiimin puolesta arvostamme suuresti äskettäistä Derma Seta-laitteen hankintaasi.

Derma Seta™ poistaa karvat miellyttävästi ja kuorii ihoa hyödyntäen erityisesti suunniteltuja kuorintatyynyjä. Teimme töitä pitkään ja hartaasti saadaksemme tämän laitteen sopivaksi ihosi hoidon ja karvanpoiston tarpeisiin. Laajojen testien jälkeen lisäsimme tuotteen terveyden ja kauneuden kokoelmaan kotikäyttöösi.

Nauti **Derma Seta™**-laitteestasi...
Ja vielä kerran kiitoksemme sinulle!


SISÄLLYS

VAROITUS	4 - 5
KÄYTTÖTURVAVAROITUKSET	5 - 6
ESITTELY	7
EDUT JA HYÖDYT	8
OSALUETTELO – Basic-yksikkö	9
OSALUETTELO – Deluxe-yksikkö	10
KÄYTTÖ	11 - 14
<i>Kokoaminen</i>	11
• <i>Perus</i>	11 - 12
• <i>Deluxe</i>	13 - 14
VINKKEJÄ	15
VARUSTEET	16 - 20
• <i>Mukana tulevat varusteet</i>	16
• <i>Lisälahjanimikkeet</i>	17
• <i>Valinnaiset nimikkeet</i>	18
• <i>Varusteiden vaihto</i>	19
• <i>Tyynyjen vaihto</i>	20
VIANETSINTÄ	21

- *DERMA CRYSTAL HAIR REMOVAL PAD -TYYNYJEN VAIHTO*




Varmista, että **Derma Seta™** -laitteen virta on katkaistu (OFF) ennen Derma Crystal Hair Removal Pad -tyynyjen vaihtoa.

- 1) Irrota nykyinen Derma Crystal Hair Removal Pad pyörivästä päästä.
- 2) Ota uusi Derma Crystal Hair Removal Pad, ja irrota suojatarra sen takaa.
- 3) Kohdista Derma Crystal Hair Removal Pad -tyynyn reuna pyörivän tyynyn reunaan.

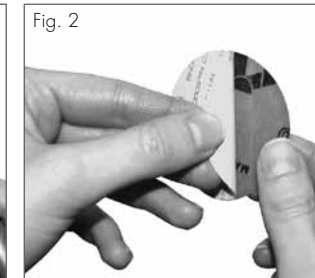

• VARUSTEIDEN VAIHTO

- 1) Varmista, että Derma Seta™ -laitteen virta on katkaistu (OFF) ennen varusteen vaihtoa.
- 2) Irrota laittamalla sormi pieneen sisennykseen pyörivän tyynyn sivussa. Vedä sitten pyörivää tyynyä sormen ollessa sisennyksessä.
- 3) Ota haluttu varuste. Kohdista Derma Seta™ -laitteen pyörivän pään kolot varustepään takana oleviin sopiviin klipseihin. Työnnä varustetta kevyesti, kunnes se kiinnittyy.

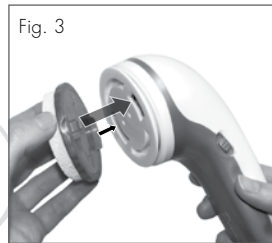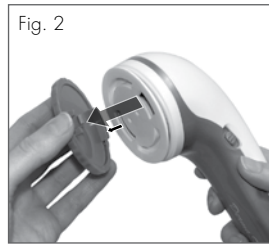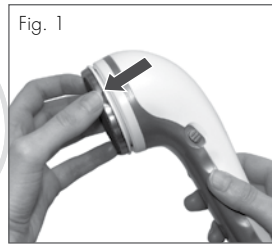

VAROITUS

- Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä oppaassa selostettuun tarkoitukseen.
- Älä käytä muita kuin valmistajan suositamia varusteita.
- Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun tätä laitetta käyttävät vammaiset henkilöt.
- Aikuisten valvonta on välttämätöntä lasten käyttäessä laitetta.
- Ei saa käyttää eläimille.
- Älä aseta laitetta sen käydessä millekään pinnalle.
- **Älä paina laitteella käsittelyn aikana liikaa. Liika painaminen heikentää käsittelyn tehoa. Moottori on säädetty joko pysähtymään tai hidastumaan merkittävästi, jos painetaan liikaa.**
- Jos poistat paljon karvoja, ensimmäiseen käsittelyyn voi kulua jonkin verran aikaa.

VAROITUS

- Jos sinulla on vallitseva ihovaiva, herkkä iho tai verenkierron ongelmia, sinun tulisi neuvotella ihotautilääkärin kanssa ennen tämän laitteen käyttöä.
- Vain ulkoiseen käyttöön.
- Älä poista karvoja luomista, auringonpolttamilta alueilta tai hiertymistä.
- Vältä auringonpolttaman ihon käsittelyä.
- Käytä ainoastaan määritettyjä varusteita bikinialueellesi, niskaan ja kasvojen alueelle. Lue lisätietoja käyttöoppaan kohdasta, joka selostaa käyttöä.
- Älä levitä kosteusemulsiota ennen käyttöä.
- Älä käytä, jos sinua vaivaavat ihotaudit tai ärsytys, kuten psoriaasi, rohtuma, ihon herkkyys, ihoallergiat, ihottumat tai verenkierron ongelmat. Jos sinulla on vähänkään epäilyksiä aiheesta, neuvottele terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa ennen käyttöä.

VAROITUS - jatkoa

- Älä yritä poistaa karvoja avoimista haavoista, viilloista, palovammoista tai syylistä.
- Älä käsittele samaa aluetta pitkää aikaa kerrallaan, koska se voi polttaa ihoa.

Huomio: tee lapputesti pienelle ihoalueelle 24 tuntia ennen käyttöä. Jos ärsytystä esiintyy, lopeta käyttö ja neuvottele ihotautilääkärin kanssa.

Huomio: jotkut henkilöt saattavat kokea pientä punoitusta käytön jälkeen. Se on aivan normaalia, ja häviää tunnissa tai parissa. Varmista, että ihosi on täysin kuiva ennen käsittelyä.

KÄYTTÖTURVAVAROITUKSET

Kuten tulee tehdä kaikille sähkölaitteille niin noudata kaikkia asiaankuuluvia käyttöturvatoimia käyttäessäsi tätä kauneudenhoitolaitetta sekä lue kaikki ohjeet ennen käyttöä.

- 1) Sähköiskun aiheuttaman kuoleman tai vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi:
 - Älä upota laitetta veteen. Jos se joutuu kosketuksiin veden kanssa, irrota välittömästi virtapistoke pistorasiasta.
 - Älä käytä kylvyssä tai suihkussa.
 - Irrota aina laitteen virtapistoke pistorasiasta käytön jälkeen tai ennen puhdistusta.
- 2) Käytä tätä laitetta ainoastaan edellä selostettuun tarkoitukseen, äläkä käytä mitään muita kuin valmistajan suositamia varusteita.

• VALINNAISET NIMIKKEET

• Perusyksikön virtalähde

Kun akku on tyhjentynyt, voit aina työntää virtalähteen pistorasiaan ja jatkaa käyttöä.

Varoitus: ennen virtalähteen käyttöä poista paristot Basic Unit -perusyksiköstä.

• Deluxe-yksikkö

Laitteen mukana tulevat ladattavat akut ja laturi, joten sinun ei koskaan enää tarvitse huolehtia uusien paristojen ostamisesta. Osaluettelossa esitetyllä nopeuskatkaisijalla voidaan valita 2 nopeutta: aloittelijoille ja tottuneille käyttäjille.

Varoitus: Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja pysyy katkaistuna (OFF), kun lataat sitä latauskehässä.



- LISÄLAHJANIMIKKEET

- Varusteet

Foot Smoother

Tämä karkearakeinen varuste on suunniteltu erityisesti jalkojen karkeisiin kohtiin.

! **Huomio:** EI SAA käyttää karvanpoistoon, käytettävä AINOASTAAN tarkoitettuun tarkoitukseen.

Macro & Micro Massage Modules

Valittavana on kaksi kokoa helpottamaan selluliitin poistoa. Ne myös vauhdittavat verenkiertoa pehmentäen ulkonäköä.



Deep Cleanser -harja

Käytä laajentamaan kaikkien kasvopuhdistusaineiden tehoa.



KÄYTTÖTURVAVAROITUKSET - jatkoa

- 3) Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen virtapistokkeen ollessa pistorasiassa ja pidä laite erossa kaikista kuumista pinnoista.
- 4) Älä koskaan käytä laitetta tai lataa sitä, jos virtapistoke tai laturiin kytketty virtajohto on vioittunut tai joutunut kosketuksiin veden kanssa.
- 5) Älä pudota pyörivää päätä tai laita mitään vierasesineitä sen sisään.
- 6) Älä käytä sekaisin erilaisia paristoja. Vaihda kaikki heikot paristot uusiin.
- 7) Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja. Paristojen lataaminen voi kehittää vetyä, joka voi aiheuttaa räjähdyksen.
- 8) Paristoja vaihdettaessa huomioikaa oikea napaisuus. Väärin päin asennetut paristot voivat kuumentua ja aiheuttaa tulipalon vaaran.
- 9) Poista täysin tyhjentyneet paristot laitteesta. Vanhat paristot voivat vuotaa ja syövyttää.
- 10) Poistakaa syöpymisen estämiseksi paristot, kun laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
- 11) Pitäkää aina paristot poissa lasten ulottuvilta.

ESITTELY

Tervetuloa kivuttoman ja helpon karvanpoiston huippumenetelmän käyttäjäksi. Nyt voit poistaa epämiellyttävät karvat käsivarsista ja sääristä nopeasti ja tehokkaasti jättäen ihosi pehmeän tuntuiseksi, silkkimäiseksi ja säteilevän kauniiksi. Varustevalikoimallaan Derma Seta™ tarjoaa ihoa hellivän kokonaiskokemuksen oman kotisi rauhassa tai missä tahansa matkustatkin.

- IMUKANA TULEVAT VARUSTEET

Derma Seta™ -laitteen mukana tulee valikoima mukavia varusteita, joilla saa aikaan elämyksellisen ihon kauneudenhoidon.

Derma Crystal Hair Removal Pad -tyyny poistaa kiinnitettynä tehokkaasti karvoja ja kuorii samalla ihoa. 5 kuorivaa lisätyynyä tulevat laitteen mukana. Lue ohjeet Derma Crystal Hair Removal Pads -tyynyjen vaihdosta sivulta 20.

! **Huomio:** Käytä tätä varustettu AINOASTAAN karvanpoistoon ja ihonkuorintaan.

Pumice Stone -hohkakivi – kiinnitä tämä poistamaan kovettumia tai karkeaa ihoa jaloista. Parhaiden tulosten saamiseksi hohkakiveä tulisi käyttää märkiin, liotettuihin jalkoihin.

Body Buffer – kiinnitä levittämään kosteusemulsio tehokkaasti vartalollesi samoin kuin poistamaan kuivaa ihoa kuorinnan jälkeen.

Facial Hair Remover – käytetään poistamaan tehokkaasti epämiellyttäviä karvoja kasvoista.

Bikini Line Hair Remover eli bikinirajan karvanpoistaja – käytetään poistamaan epämiellyttäviä karvoja bikinirajan alueelta.



VINKKEJÄ

- Päättele kaikessa rauhassa paras liike parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
- Tulokset voivat vaihdella, mutta optimituloksia saadaan tyypillisesti aikaan käytämällä Derma Seta™ -laitetta 10 – 12 kertaa.
- Derma Crystal -tyyny on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivina, ja vioittuvat käytettäessä niiden kanssa jotakin nestettä, kosteusemulsiota, karvanpoistovoiteita tai geelejä.
- Tyynyn muuttuessa huomattavasti pehmeämmäksi vaihda tilalle uusi parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

EDUT JA HYÖDYT

Ymmärrämme, kuinka kiireistä elämä saattaa olla ja ulkonäöstä huolehtimiseen voi kulu paljon aikaa. **Derma Seta™** kehitettiin juuri sinun kiireistä aikatauluasi varten. Muotoilumme on hyvin käyttäjäystävällinen ja laite äärimmäisen helppo käyttää. Siten sinulle jää enemmän aikaa päivisin tehdä kaikkein tärkeimpiä asioita elämässä. Höyläämisen, vahapoistojen ja jalkahoitojen sijasta **Derma Seta™** saa aikaan samat tulokset vähemmässä ajassa. **Derma Seta™** on ihanteellinen tuote antamaan sinulle haluamasi tulokset silloin kun se sinulle sopii, koska laite poistaa mahdolliset kivut, lisäkulut ja ammattilaisella kuluvan ajan.

Derma Seta™ on suunniteltu poistamaan karvat miellyttävästi ja kuorimaan ihoa hyödyntäen erityisesti suunniteltuja Derma Crystal -karvanpoistotyynyjä. Tyynyt ovat erinomaisia poistamaan hellävaraisesti karvoja käsivarsista ja sääristä, ja toisin kuin karvanpoisto laserilla tämä sopii kaikille ihotyypeille.

Tämä monipuolinen kauneudenhoitoväline on pienikokoinen, mukana kulkeva ja helppo käyttää. Varustevalikoimallaan se on täydellisesti suunniteltu poistamaan kovettumia, pehmentämään ihoa ja levittämään kosteusvoiteita sekä poistamaan rutiinimaisesti karvoja.

Sinun ei koskaan enää tarvitse huolehtia karvojen ajon nirhamista ja hiertymistä, koska **Derma Seta™** poistaa epä mukavat karvat tehokkaasti ja kivuttomasti. **Derma Seta™** jättää jälkeensä pehmeän, karvattoman ihon ja kohonneet verenkierron 1-2 päiväksi, ja on ehdoton tuote helppoon, kivuttomaan karvanpoistoon.

OSALUETTELO – BASIC-YKSIKKÖ



- 6) Varustepää pyörii vain vastapäivään. Paina kuorintakiekkoo ihoasi vasten kevyesti (tyynyjen pitämien liian kauan samassa paikassa voi aiheuttaa ihoon palovammoja).
- 7) Liikuta pyörivää kiekkoa pehmein pyörivin liikkein vastapäivään, ja käsittele vähitellen koko alue. Tunnet lämpimän tuntemuksen, mikä on tavallista. Kokeilemalla voit päätellä tarkan painalluksen, joka poistaa karvat tehokkaasti. Älä pidä pyörivää kiekkoa liian kauan yhdessä kohdassa.
- 8) Kuorintatoiminnossa iholle kertyy hienoa valkoista puuteria. Se on normaalia, koska poistomenetelmä hienontaa karvat ja kuivan ihon jauheeksi, jonka voi poistaa pehmeällä harjavarusteella. (Lue lisätietoja varusteita koskevasta kohdasta).
- 9) Tunnustele ihoasi siirtäessäsi tynnyä. Jos ohitat jonkun kohdan tai havaitsit sitkeän alueen, kuljeta tynnyä kevyesti alueen yli uudestaan kiertoliikkein, kunnes karvat ovat poissa.
- !** **Huomio:** Derma Seta™-laitteen käyttö liian pitkään voi aiheuttaa ihoon palovammoja.
- 10) Kun olet valmis, paina virtakatkaisija asentoon OFF ja laita laite takaisin latauskehtoon.
- !** **Huomio:** Varmista, että laitteen virta on katkaistu ja pysyy katkaistuna (OFF), kun lataat sitä latauskehdoissa.

- DELUXE-YKSIKKÖ

1) Kytke latauskehto mukana tulleeeseen virtalähteeseen. Työnnä virtapistoke pistorasiaan, jolloin kehdon etureunaan syttyy valo. Kun valo on vihreä, **Derma Seta™** on ladattu. Kun valo on punainen, laite tarvitsee latausta (parhaisiin tuloksiin pääsee, kun **Derma Seta™** on täysin ladattu).

! **Huomio:** laitteen lataamiseen voi kulua enintään 4 tuntia.

2) Kun **Derma Seta™** on ladattu (kehdon merkkivalo on vihreä), muista kytkeä virtakatkaisin asentoon OFF ja poistaa laite kehdosta.

3) Irrota taustatarra Derma Crystal Hair Removal Pads -tyynyistä, ja kiinnitä varuste pyörivään päähän.

4) Kohdista **Derma Seta™**-laitteen pyörivän pään kolot varustepään takana oleviin sopiviin klipseihin. Työnnä varustetta kevyesti, kunnes se kiinnittyy.

5) Kun varustepää on tukevasti paikallaan, paina virtakatkaisija asentoon ON (pyörivä pää alkaa pyöriä). Voit lisätä pyörivän pään nopeutta työntämällä virtakatkaisijaa ylös yhden tai kaksi pykälää. Voit valita haluamasi nopeuden: hidas ja nopea, Low ja High.

! **Vaara:** älä levitä kosteusemulsioita ennen käyttöä.

OSALUETTELO – DELUXE-YKSIKKÖ



KÄYTTÖ

Derma Seta™ ja sen varusteet on valmistettu huolella tarjoamaan helppo käyttö sekä loistavat tulokset. Tyynyjen karkeus on valittu erityisesti poistamaan karvoja käsivarsista ja sääristä.

Parhaiden tulosten saamiseksi noudata näitä vaiheita:

Ennen käyttöä: jos tyyliisi kuuluvat pitkät hiukset, muista pitää ne erossa pyörivistä tyyneistä, koska hiukset voivat sotkeutua niihin. Älä käytä tätä laitetta, jos sinulla on ihoärsytystä tai haavoja.

KOKOAMINEN

• PERUSYKSIKKÖ

- 1) Avaa Derma Seta™-laitteen kahvassa olevan akkukotelon kansi, ja laita sisään kuusi ladattavaa AA-koon alkaliakkua (noudata akkukotelon ohjepiirrosta). Sulje kansi.
- 2) Irrota taustatarra Derma Crystal Hair Removal Pads -tyynyistä, ja kiinnitä varuste pyörivään päähän.
- 3) Kohdista Derma Seta™-laitteen pyörivän pään kolot varustepään takana oleviin sopiviin klipseihin. Työnnä varustetta kevyesti, kunnes se kiinnittyy.

4) Kun varustepää on tukevasti paikallaan, paina virtakatkaisija (on Derma Seta™-laitteen kahvan sivussa) asentoon ON.

5) Varustepää pyörii vain vastapäivään. Paina kuorintakiekkoo ihoasi vasten kevyesti (tyynyjen pitämien liian kauan samassa paikassa voi aiheuttaa ihoon palovammoja).

! Huomio: älä levitä kosteusemulsiota ennen käyttöä.

6) Liikuta pyörivää kiekkoa pehmein pyörivin liikkein myötäpäivään, ja käsittele vähitellen koko alue. Tunnet lämpimän tuntemuksen, mikä on tavallista. Kokeilemalla voit päätellä tarkan painalluksen, joka poistaa karvat tehokkaasti. Älä pidä pyörivää kiekkoa liian kauan yhdessä kohdassa.

7) Kuorintatoiminnossa iholle kertyy hienoa valkoista puuteria. Se on normaalia, koska poistomenetelmä hienontaa karvat ja kuivan ihon jauheeksi, jonka voi poistaa pehmeällä harjavarusteella. (Lue lisätietoja varusteita koskevasta kohdasta).

8) Tunnustele ihoasi siirtäessäsi tyynejä. Jos ohitat jonkun kohdan tai havaitset siikeän alueen, kuljeta tyyneä kevyesti alueen yli uudestaan kiertoliikkein, kunnes karvat ovat poissa.

! Huomio: Derma Seta™-laitteen käyttö liian pitkään voi aiheuttaa ihoon palovammoja.

9) Kun olet valmis, paina virtakatkaisija asentoon OFF.

! Huomio: Varmista, että laitteen virta on katkaistu (OFF), ennen kuin laitat sen telineeseen.

DermaSeta™

Jakelija:

Tvins AB
www.tvins.com

Thane Direct Canada Inc.,
Mississauga, ON
www.thane.ca

Thane Direct UK Ltd.,
Admail ADM3996,
London, W1T 1ZU
www.thanedirect.co.uk



Copyright © 2010 Thane International, Inc.

DS-REV 4- ENG 15/04/10