

SALON LASER™

SCANNING HAIR REMOVER

LAHS2

Våglängd 808 nm

Det är inte nödvändigt att använda skyddsglasögon, eftersom produkten har inbyggda säkerhetsfunktioner.

LASER SAFE™
TECHNOLOGY

PATENTSOÖKT



PRODUKT I KLASS 1 SOM INNEHÅLLER LASER I KLASS 3B



anvisningar

1-IN-LAHS2-SWNO/1.0


VARNINGAR

- Läs anvisningarna noga och behåll dem så att du kan komma tillbaka till dem vid behov.
- Lämpar sig inte för afrokanbisk, mörk hud eller grått hår. Se "Lämpliga hudtyper" i informationsguiden.
- Hårborttagning med laser ska inte göra ont. Du kanske känner när vissa hårstrån behandlas. Det känns som ett lätt nålsting eller att området blir lite varmt. Om du känner obehag eller smärta, kan inställningen vara för hög.
- Visserligen har produkten inbyggda säkerhetsfunktioner som gör att ögonen skyddas från att utsättas för laser, men staven får aldrig riktas mot ögonen eller nära ögonen.
- Använd INTE produkten i närheten av lättantändliga material.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Reflektionsfara: Ta av alla smycken i närheten av behandlingsområdet före användning.
- När du är klar måste du ta ur nyckeln och lägga den på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
- Behandla inte samma hårstrå flera gånger under samma behandling.
- Använd inte produkten när du har druckit alkohol eller om du känner dig sjuk eller trött.
- Behandla inte följande områden: tatueringar, permanent makeup, finnar, vårtor, hår på svarta fläckar eller hudmärken, mörka fräcknar, hudsjukdom, födelsemärken, brännmärken, läppar, bröstvårtor, köns- eller analområde, eksem, ögonfransar, ögonbryn, nära ögonen, näs- eller öronhår.
- Detta är en känslig produkt för laserscanning. Var försiktig så att mekanismen i staven inte skadas.

FÖRSIKTIGHETSMÅTT

- Reparera den INTE och plocka INTE isär den Om du stöter på problem när du använder produkten, kontakta vår kundtjänstavdelning.
- Oriktig användning av produkten kan orsaka skador.
- Förbikoppla INTE säkerhetsfunktionerna och öppna INTE konsolen eller staven.
- Använd produkten bara med den medföljande nätadaptern.
- Håll staven på avstånd från starka elektromagnetiska fält och magneter under användningen.

BESTÅNDSDELAR

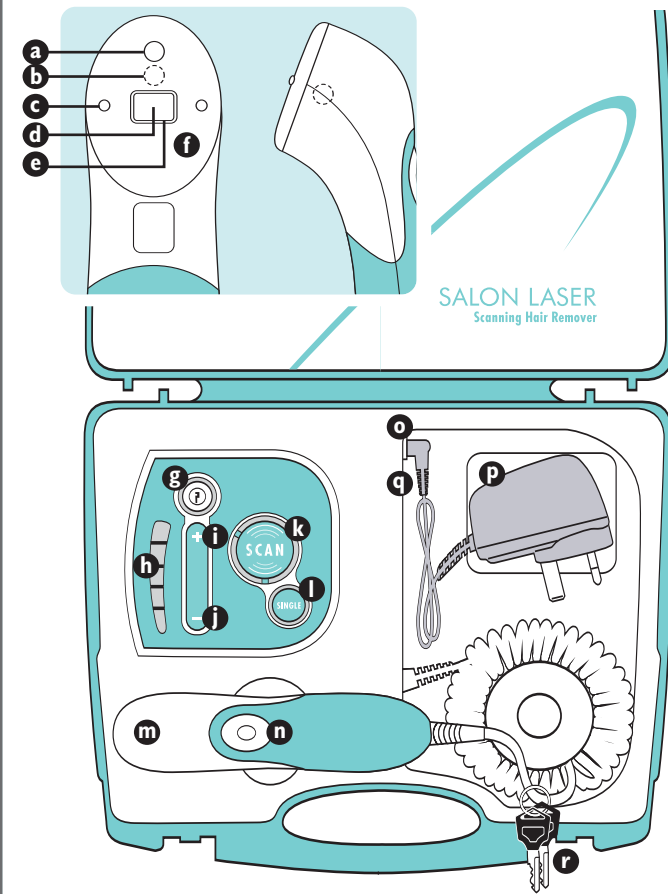


- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a. Gul lampa | g. Nyckelomkopplare | n. Laserknapp |
| b. Vit lampa | h. Effektivvärdindikator | o. Elintag (likström) |
| c. Pekpinnar | i. Effekttökningsknapp (+) | p. Nätadapter |
| d. Laseröppning | j. Effektminskingsknapp (-) | q. Tystknapp |
| e. Vägledningsmärke vid behandling | k. SCAN-knapp | r. Nycklar |
| f. Framsida | l. SINGLE-knapp | |
| | m. Handhållen stav | |

BEHANDLINGSOMRÅDE

SCAN-läge


I SCAN-lägena behandlas hårstrån ett efter ett inom ett område under ett och samma behandlingstillfälle.

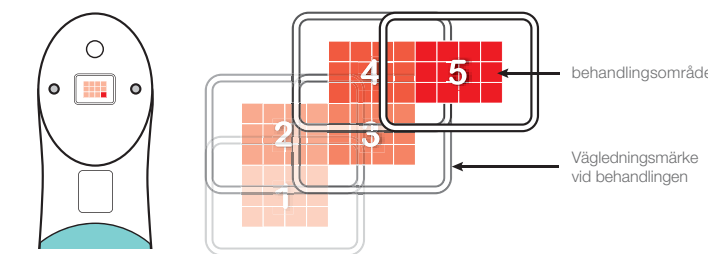

Som vägledning vid behandlingen lämnas en liten fördjupning på huden när staven pressas ned. I SCAN-läget täcker lasern ett område på 7 x 5 mm.

Genom att föra staven så att fördjupningen överlappas med en tredjedel i vardera riktningen garanteras en effektiv täckning.

SINGLE-läge

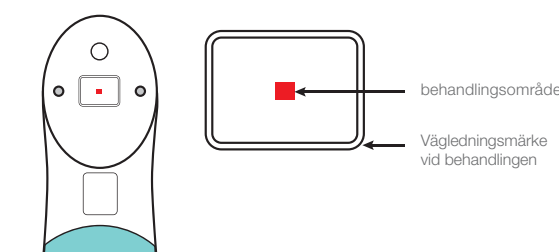

SINGLE-läget används vid behandling av enskilda hårstrån. Behandlingsområdet ligger i mitten av vägledningsmärket och är 2 x 2 mm stort.

TESTA PÅ ETT MINDRE OMRÅDE

VIKTIGT: Det är mycket viktigt att testa på ett mindre område 24 timmar före behandlingen.

Testet anger den maximala effektivnivån för din hudtyp. Varje område som ska behandlas måste testas, eftersom hudfärgen kan variera. Se anvisningarna i avsnittet "TESTA PÅ ETT MINDRE OMRÅDE" som ges i informationsguiden och på DVD:n.


Det kan uppstå en lätt rodnad efter behandlingen. Lokal rodnad efter behandlingen orsakas av att hårsäckarna förstörs och är för hög för din hudtyp. Om rodnaden inte försvinner inom 24 timmar är detta ett tecken på att den valda effektivnivån är för hög för din hudtyp.

INNAN DU BÖRJAR


Läs informationsguiden så att du förstår varningarna och avsnitten om produktsäkerhet innan du använder produkten.

För att nå bästa resultat rekommenderar vi att du använder SCAN-läget. På så sätt behövs hårstråna inte behandlas enskilt, eftersom behandlingen sker på hela området.

- Bästa resultat fås på hår som har klippts ned till en längd på 1 - 2 mm.
- Ta av alla smycken i närheten av behandlingsområdet.
- Se till att du har testat produkten på det område som ska behandlas 24 timmar före behandlingen.

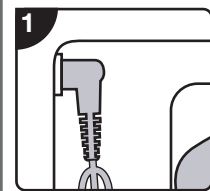

STEG 1
Koppla nätadaptern i elintaget (likström) som finns på enhetens baksida och koppla den till elnätet.

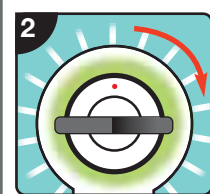


STEG 2
Sätt på enheten genom att låsa upp med nyckeln. Lampan runt nyckelomkopplaren blinkar i grönt.




STEG 3
För in "SAKERHETSKNAPPENS SEKVENS" inom 60 sekunder efter att du har vridit PÅ nyckelomkopplaren.

Säkerhetsknappens sekvens ges i informationsguiden.

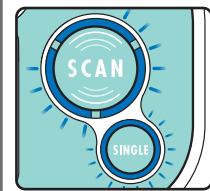

Den gröna lampan runt nyckelomkopplaren tänds helt. Lamporna runt knapparna SCAN och SINGLE blinkar i blått vilket anger att knapparna nu kan väljas. Den nedre effektivivålampan tänds.

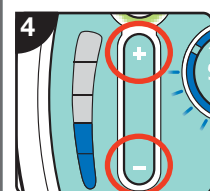


STEG 4
Välj rätt effektivivå för din hudtyp med + och - knapparna. Se anvisningarna om hudtyper i avsnittet "Testa på ett mindre område" som finns i informationsguiden.

Varje gång effektivivån justeras måste du välja läget SCAN eller SINGLE igen innan du fortsätter.


Obs! Om ingen knapp trycks ner på 20 minuter går enheten in i energisparläge. Då blinkar den orange lampen och effektivivå 1 är fortfarande valt. Starta den igen genom att vrida nyckeln till av-läget och sedan tillbaka till på-läget igen, och börja vid steg 3.

HÅRBEHANDLING MED LASER

SCAN-HÅRBEHANDLING

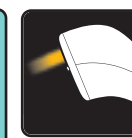

STEG 5
Tryck ned SCAN-knappen en gång. Den blå lampen runt SCAN-knappen tänds helt.
Den gula lampan på staven tänds.

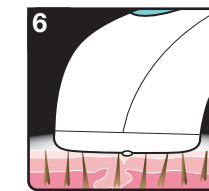


STEG 6
Placera staven på det hudområde du ska behandla, se till att pekpinarna ligger i kontakt med huden.

Se anvisningarna i avsnittet "Behandlingsområde", SCAN-läge.

Den gula lampan SLOCKNAR och den vita "redo"-lampan TÄNDS.



Den blå lampan runt SCAN-knappen roterar för att ange att behandlingen kan inledas.

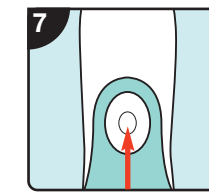

STEG 7
Tryck och HÅLL NED laserknappen på toppen av staven för att inleda behandlingen.

Den vita lampen blinkar för att ange att laserbehandlingen pågår och enheten piper regelbundet (ljudet kan stängas av). Du kan inte se lasern.

När laserbehandlingen upphör tänds den gula lampan igen. Du kan nu fortsätta med behandlingen av nästa hårområde.

Du kan uppleva en "nålsticks känsla" under behandlingen. Lokal rodnad efter behandlingen orsakas av att hårsäckarna förstörs och är helt normalt. Om rodnaden inte försvinner inom 24 timmar är detta ett tecken på att den valda effektivnivån är för hög för din hudtyp.


Se anvisningarna i avsnittet "Testa på ett mindre område" i informationsguiden. Eventuell långvarig rodnad kommer också att försvinna.

När staven förs till nästa hårområde som ska behandlas måste pekpinarna lyftas upp från huden innan de sätts ned igen.

Se anvisningarna i avsnittet "Behandlingsområde", SCAN-läge.

VIKTIGT - LÄS NOGA



- Flytta INTE på staven under behandlingen. Staven värms upp under användning – detta är helt normalt.
- I SCAN-läget körs lasern i 10 sekunder på den lägsta effektivivån och i upp till 50 sekunder på den högsta nivån. I SINGLE-läget körs lasern i 2 sekunder på den lägsta effektivivån och i upp till 10 sekunder på den högsta effektivivån.
- Om kontakten mellan pekpinarna och huden avbryts under behandlingen tänds den gula lampen. Behandlingen fortsätter när kontakten återställs.
- Ibland kan du känna en svag lukt av bränt eller till och med se en mycket smal rökstrimma när ditt hår behandlas.
- Hårstrån som har behandlats framgångsrikt faller inte alltid ut omedelbart utan bara så småningom allteftersom de lossnar från hårsäcken. Om du gnider lätt på huden, sker det fortare.

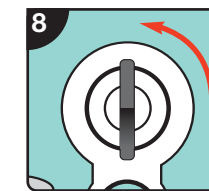

STEG 8
Lås enheten genom att vrida nyckelomkopplaren moturs. Ta ur nyckeln och förvara den på ett säkert ställe utom räckhåll för barn.
Nyckelomkopplaren lyser gult tills adaptern har kopplats ur.


Obs! Om produkten inte fungerar såsom väntat, kan detta eventuellt orsakas av yttre elektromagnetisk störning, t.ex. elektriska motorer/högtalare. Avlägsna den orsakande källan och starta produkten igen så att den återgår till full funktion. Lasern avfyras inte oavsiktligt.

SINGLE-HÅRBEHANDLING

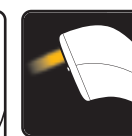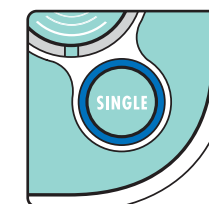

Du kan välja att behandla enskilda hårstrån i SINGLE-läget.
Tryck ned SINGLE-knappen en gång. SINGLE-knappen lyser blått.
Den gula lampan på staven tänds.

Följ samma procedur som för SCAN-behandlingen från steg 6, men tryck denna gång ned SINGLE-knappen.

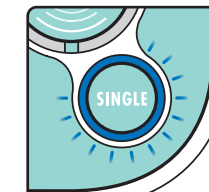


I SINGLE-läget blinkar den blå lampan runt SINGLE-knappen.

Behandlingstiden är 2-10 sekunder i SINGLE-läget, beroende på effektivivån.

Se avsnittet "Rikta och positionera", SINGLE-läge.


TILLÄGGSINFORMATION

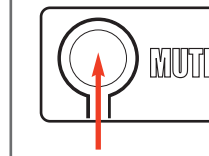

Tryck ned MUTE-knappen på enhetens baksida för att stänga av pipljuden. Tryck ned knappen igen för att aktivera pipljuden.


Obs! Detta stänger inte av varningsljuden.

återställ efter "lockout"

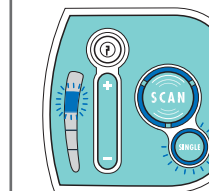

Vid en "lockout", som anges av att någon av de blå effektlamporna blinkar upprepat, återställ enheten genom att stänga av den med nyckeln, vänta i 5 sekunder och sätta på enheten igen.

rengör laseröppningen

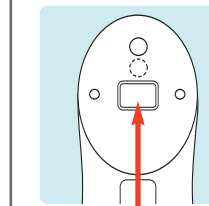

Kontrollera regelbundet att det inte finns några rökansamlingar på laseröppningen. Rökansamlingar påverkar laserns effektivitet. Om du upptäcker ansamlingar, stäng AV enheten och koppla ur nätadaptern. Rengör därefter med en luddfri trasa eller en bomullspinne, så att du får bort alla fibrer från laseröppningen.

Laseröppning