

SALON LASER™

SCANNING HAIR REMOVER

LAHS2

808 nm
bølgelengde

Det er ikke nødvendig å bruke vernebriller, da laseren er utformet med innebygde sikkerhetsfunksjoner.

LASER SAFE™
TECHNOLOGY

PATENTANMELDT



KLASSE 1 PRODUKT
SOM INNEHOLDER
KLASSE 3B LASER



Denne laseren MÅ brukes fornuftig.

Vennligst les gjennom denne bruksanvisningen grundig før bruk.

Se din Informasjonsguide for:

- ADVARSEL
- SIKKERHETSKNAPPENS KODE
- HVORDAN FUNGERER LASERE?
- EGNED E HUDTYPER
- FLEKKTEST
- HÅRVEKSTSYKLUSEN
- HVORFOR ER DET NØDVENDIG MED EN REKKE BEHANDLINGER?
- SPØRSMÅL OG SVAR
- FEILSØKING



bruksanvisning


ADVARSEL

- Les gjennom hele bruksanvisningen grundig og oppbevar den til fremtidig bruk.
- Ikke egnet til afro-karibiske eller mørke hudfarger. Ikke egnet til grått hår. Se "Egnede hudtyper" i informasjonsguiden.
- Laserfjerning av hår skal ikke være ubehagelig. Hvis du kjenner ubehag eller er sår, er kanskje innstillingen for høy, eller hudfargen din er ikke egnet til bruk med denne laseren.
- Innebygde sikkerhetsfunksjoner beskytter øyet mot laseren. Du må imidlertid aldri rette staven mot eller nær øynene.
- Du må IKKE bruke laseren nær brennbart materiale.
- Oppbevar laseren utilgjengelig for barn og husdyr.
- Refleksjonsfare: Fjern alle smykker nær behandlingsområdet før bruk.
- Når laseren ikke er i bruk, må nøkkelen oppbevares på et trygt sted, utilgjengelig for barn.
- Du må ikke behandle samme hårstrået gjentatte ganger i samme behandlingsomgang.
- Du må ikke bruke laseren etter at du har nytt alkohol, eller føler deg uvel eller tret.
- Du må ikke behandle følgende områder: tatoveringer, permanent make-up, kviser, vorter, hår på svarte prikker eller føflekker, mørke fregner, hudsykdom, fødselsmerker, brannår, lepper, brystvorter, kjønnsorganer eller på anale områder, eksem, øyenbryn, nær øynene, hår i nese eller ører.
- Dette er et sensitivt laserskanningsprodukt. Vær forsiktig slik at du unngår skade på mekanismen i staven.

FORSIKTIG

- Du må IKKE ta laseren fra hverandre eller reparere den. Hvis du har problemer, skal du kontakte kundetjenesten.
- Misbruk av enheten kan føre til skade.
- Du må IKKE forbikoble noen av sikkerhetsfunksjonene eller åpne enheten eller staven.
- Laseren må kun brukes med strømadapteren som følger med.
- Hold staven unna sterke elektromagnetiske felt og magneter under bruk.

DELER

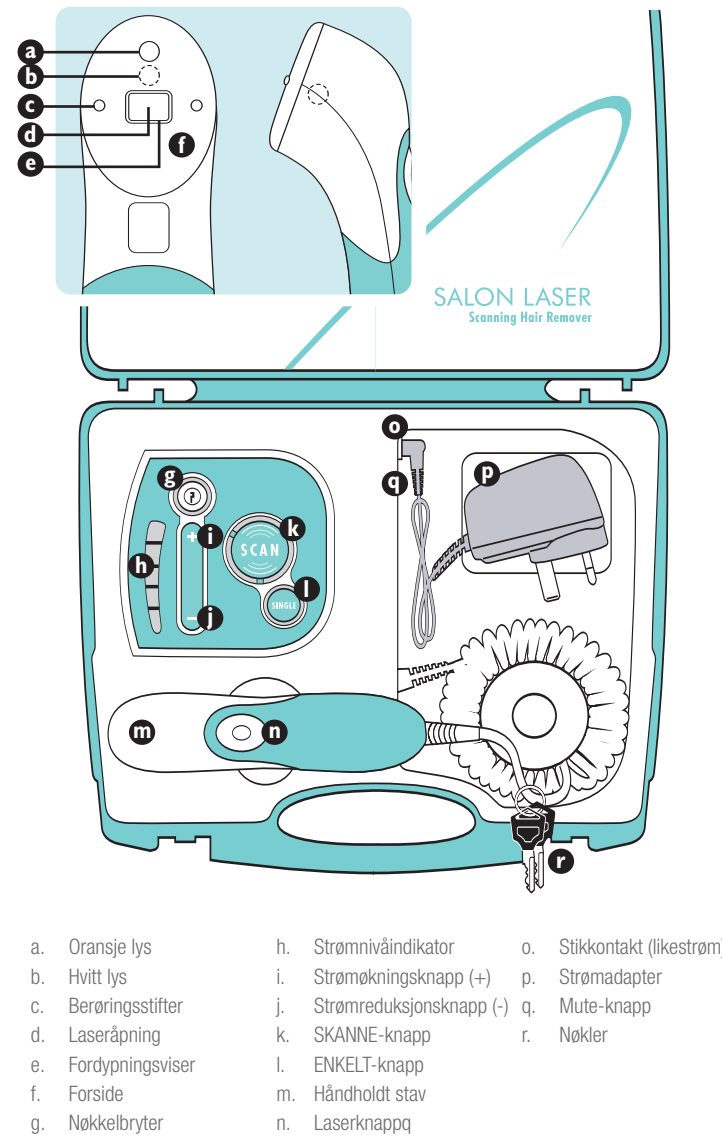


- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| a. Oransje lys | h. Strømnivåindikator | o. Stikkontakt (likestrøm) |
| b. Hvitt lys | i. Strømkningsknapp (+) | p. Strømadapter |
| c. Berøringsstifter | j. Strømreduksjonsknapp (-) | q. Mute-knapp |
| d. Laseråpning | k. SKANNE-knapp | r. Nøkler |
| e. Fordypningsviser | l. ENKELT-knapp | |
| f. Forside | m. Håndholdt stav | |
| g. Nøkkelbryter | n. Laserknapp | |

BEHANDLINGSOMRÅDE

“SKANNE”-modus


SKANNE-modiene behandler de individuelle hårene i rekkefølge i løpet av hver behandling.

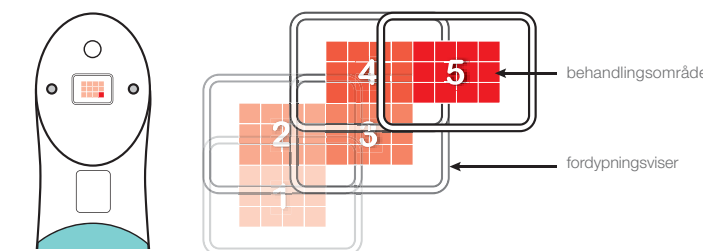

Som en rettesnor angående behandlingsområdet vil det bli et lite fordypningsmerke når staven trykkes mot huden. I SKANNE-modus dekker laseren et område på 7mm x 5mm.

Hvis du overlapper fordypningsmerket med en tredjedel når du beveger staven i hver retning, kan du være sikker på effektiv dekning.

“ENKELT”-modus

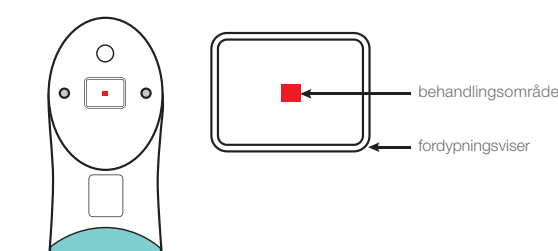

ENKELT-modus er til behandling av individuelle hårstrå. Behandlingsområdet er i midten av fordypningsviseren og måler 2mm x 2mm.

HUDTEST

VIKTIG: 24 timer før behandlingen er det svært viktig at du foretar en flekktest.

Flekktesten vil bekrefte maksimalt strømnivå for din hudtype. Hvert område som skal behandles må sjekkes, da hudfargen kan variere. Vennligst se avsnittet “FLEKKTEST” i informasjonsguiden og på DVD'en for bruksanvisninger.


Det kan oppstå lett rødhet etter behandlingen. Lokal rødhet etter behandlingen oppstår fordi hårfolliklene ødelegges, og dette er helt normalt. Men hvis du fremdeles har rødhet etter 24 timer, er det et tegn på at strømnivået du valgte var for høyt for din hudtype.

KOMME I GANG

Vennligst påse at du leser informasjonsguiden og forstår avsnittene “Advarsler” og “Produktsikkerhet” før du begynner.

For best resultater anbefaler vi at du bruker SKANNE-modus. Denne krever ikke individuell behandling av enkelte hårstrå, fordi den behandler et helt område.


- Best resultat oppnås på hår som er stuset til 1mm–2mm i lengde.
- Ta av alle smykker som befinner seg nær behandlingsområdet.
- Sørg for at du har flekktestet området som skal behandles 24 timer før behandlingen.

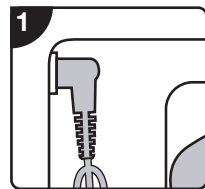

TRINN 1

Sett strømadapteren inn i stikkontakten på baksiden av enheten og koble til forsyningsnettet.

Nøkkelbryteren vil lyse oransje.

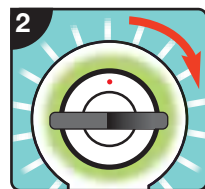

TRINN 2

Lås opp med nøkkelen for å slå på. Lyset rundt nøkkelbryteren vil blinke grønt.




TRINN 3

Tast inn “SIKKERHETSKNAPPENS KODE” innen 60 sekunder etter at nøkkelbryteren er PÅ.

Du finner sikkerhetsknappens kode i informasjonsguiden.

Det grønne lyset rundt nøkkelbryteren vil lyse. Lydene rundt SKANNE- og ENKELT-knappene vil blinke blått, klare for valg. Det nederste strømnivåindikatorlyset vil lyse.

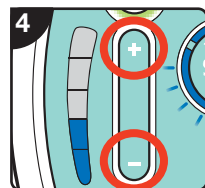

TRINN 4


Bruk +/--knappene for å velge korrekt strømnivå for din hudtype. Se avsnittet “Flekktest” i informasjonsguiden angående hudtyper.

Hver gang strømnivået justeres, må du velge SKANNE- eller ENKELT-modus om igjen for å fortsette.

Merk: Hvis ingen knapper trykkes innen 20 minutter, vil enheten slås av helt. For å starte på nytt vri nøkkelen av og på igjen og begynn på trinn 3.

LASER HÅRBEHANDLING


HÅRBEHANDLING MED “SKANNING”

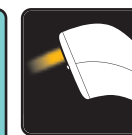

TRINN 5

Trykk SKANNE-knappen én gang. Det blå lyset rundt SKANNE-knappen vil lyse.

Det oransje lyset på staven vil lyse.

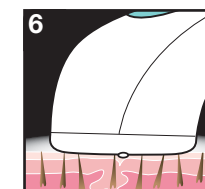

TRINN 6


Plasser staven på huden over området du vil behandle, og forsikre deg om at berøringsstiftene er i kontakt med huden.

Se avsnittet “behandlingsområde”, SKANNE-modus.

Det oransje lyset vil bli slått AV, og det hvite “klart”-lyset vil bli slått PÅ.



De blå lysene rundt SKANNE-knappen vil rotere for å vise at behandlingen er klar til å begynne.

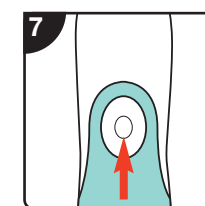


TRINN 7


Trykk og HOLD laserknappen øverst på staven for å begynne laserbehandlingen.

Det hvite lyset vil blinke av og på for å vise at laserbehandlingen pågår, og enheten vil pipe gang på gang (denne lyden kan dempes). Du kan ikke se laseren.

Når laserbehandlingen stopper, vil det oransje lyset komme på igjen. Du kan nå flytte til neste område som skal behandles.

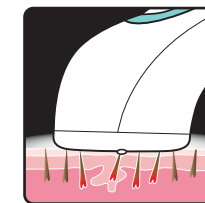

Det er mulig at du kjenner en følelse av svake nålestikk under behandlingen. Lokal rødhet etter behandlingen oppstår fordi hårfolliklene ødelegges, og dette er helt normalt. Men hvis du fremdeles har rødhet etter 24 timer, er det et tegn på at strømnivået du valgte var for høyt for din hudtype. Vennligst se avsnittet “Flekktest” i informasjonsguiden. Vi gjør også oppmerksom på at rødhet som eventuelt varer lengre, vil også forsvinne.

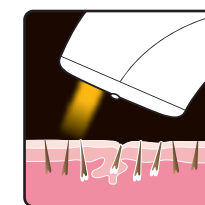


Når staven flyttes til det neste området med hår som skal behandles, må berøringsstiftene øyeblikkvis løftes fra huden.

Se avsnittet “behandlingsområde”, SKANNE-modus.

VIKTIGE MERKNADER – vennligst les gjennom grundig

- Du må IKKE bevege staven under behandlingen. Du vil kanskje legge merke til at staven blir varm under bruk, dette er helt normalt.
- I SKANNE-modus vil laseren gå i 10 sekunder på det laveste strømnivået og i opptil 50 sekunder på det høyeste nivået. I ENKELT-modus vil laseren gå i 2 sekunder på det laveste strømnivået og i opptil 10 sekunder på det høyeste strømnivået.
- Hvis kontakten opphører mellom berøringsstiftene og huden under behandlingen, vil det oransje lyset bli slått på. Behandlingen vil fortsette når kontakten er gjenopprettet.
- Noen ganger kan det lukte litt brent eller du ser litt røyk mens håret behandles.
- Selv om hårbehandlingen har vært vellykket, faller ikke alltid hårene ut umiddelbart, men over tid etter som de slippes av hårfollikkelen. Lett gniing kan fremskynde prosessen.


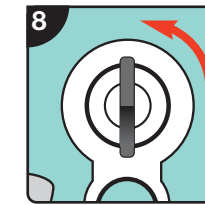


TRINN 8

Vri nøkkelbryteren mot klokken for å låse enheten. Oppbevar nøkkelen på et trygt sted, utilgjengelig for barn. Nøkkelbryteren vil lyse oransje inntil adapteren tas ut av støpselet.

Merk: Hvis du får uventede problemer med dette produktet, er det mulig at årsaken er ekstern elektromagnetisk forstyrrelse, f. eks. fra elektriske motorer/høytalere osv. Du må fjerne denne kilden og starte produktet igjen for å gjenopprette full drift. Laseren vil ikke på noe tidspunkt starte utilsikket.

BEHANDLING AV ET “ENKELT” HÅRSTRÅ

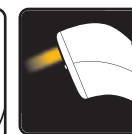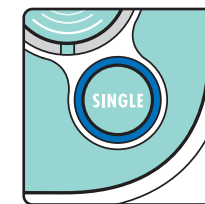


Du kan velge å behandle individuelle hårstrå med bruk av ENKELT-modus.

Trykk “ENKELT”-knappen én gang. ENKELT-knappen vil lyse blått.

Stavens oransje lys vil lyse.

Følg den samme fremgangsmåten som for SKANNE-behandlingen fra trinn 6, men denne gangen trykker du ENKELT-knappen.

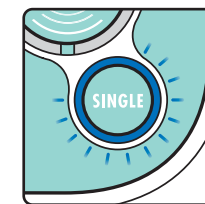


I ENKELT-modus vil det blå lyset rundt ENKELT-knappen blinke.

Behandlingstiden er mellom 2–10 sekunder i ENKELT-modus, avhengig av det strømnivået som er valgt.

Se avsnittet “sikte og plassere”, ENKELT-modus.


TILLEGGSINFORMASJON

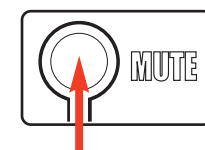

Trykk MUTE-knappen på baksiden av enheten for å slå av pipelyden. Trykk igjen for å slå den på igjen.


Merk: Dette slår ikke av varselpipelydene.

nullstilling etter sperring

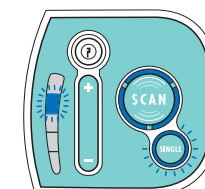

Hvis enheten er sperret, vist ved at et av de blå strømlysene blinker gang på gang, skal du bare nullstille den ved å slå den av med nøkkelen. Vent i 5 sekunder og slå enheten på igjen.

rengjøring av laseråpningen

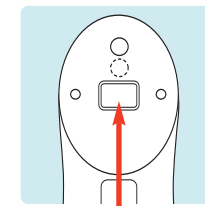

Sjekk fra tid til annen om det finnes røyk på laseråpningen. Ansamling av røyk vil påvirke laserens effektivitet. Hvis du legger merke til en ansamling av røyk, slå enheten AV og ta ut strømadapterens støpsel. Så kan du ganske enkelt rengjøre med en lufri klut eller bomullspinne, men forsikre deg om at det ikke finnes fibre igjen.

laseråpning